




## Oligoer og Primere

Vi kan tilbyde oligoer og primere fra det danske firma PentaBase ApS

PentaBase leverer trejde generations primer og probe teknologier, der let kan substituere **TaqMan®**, **MGB**, **Molecular Beacon** og andre DNA-baserede prober:

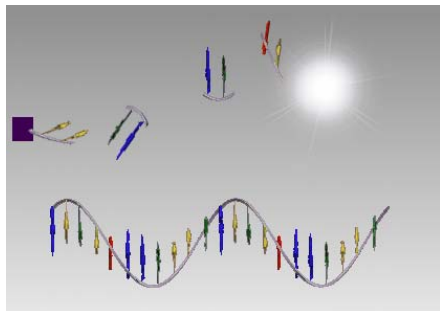


### HydroIDEasy™ EasyBeacons™

Læs mere > [Probes](#)

PentaBase har også udviklet deres egne modificerede primere:

### SuPrimers™

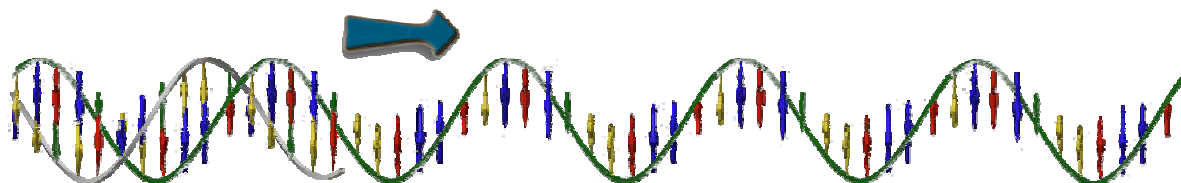

#### Egenskaber ved SuPrimers™

- Færre primer-dimere
- Højere arbejdstemperatur

Læs mere > [Primers](#)

Vi tilbyder endvidere standard DNA prober and primere af høj kvalitet, samt en række modifikationer, DNA og RNA analoger – se mere på [www.pentabase.com](http://www.pentabase.com)

### **Kvalitet og kontrol**

Alle oligoer laves på kolonner og med tritylkontrol. Dvs. at kvaliteten følges nøje under syntesen og udbyttet og renheden er højere end på 96-brønds pladesynteser.

Alle prober og modificerede primere tilbydes oprensede på HPLC efterfulgt af EtOH fældning og kuvette baseret koncentrationsbestemmelse. HPLC oprensningen virker samtidig som kvalitetskontrol. Normalt leveres oligoerne nedtørret i individuelle rør. Vi tilbyder genopløsning (i vand) til fast koncentration uden ekstra beregning.

### **Bestilling af oligoer og primere**

Send email til [info@kem-en-tec.dk](mailto:info@kem-en-tec.dk)